

La diagnosi precoce nella forma migliore.

Alterazioni profonde.


Le misure profilattiche sempre più assidue hanno cambiato la manifestazione clinica della carie. Denti che in apparenza sembrano sani, vengono attaccati all'interno. KaVo DIAGNOdent non si fa disorientare dalle apparenze.

Massima sensibilità.


Il laser a raggi fluorescenti KaVo DIAGNOdent® porta alla luce anche lesioni piccolissime: sia numericamente che acusticamente. Con la massima affidabilità e senza emissione di raggi a carico del paziente. Senza sonda, evitando di ledere la struttura dentale.

KaVo DIAGNOdent.

Quanto di meglio per l'odontoiatra ed i suoi pazienti. Una diagnosi sicura e delicata. Non invasiva e altamente conservativa.

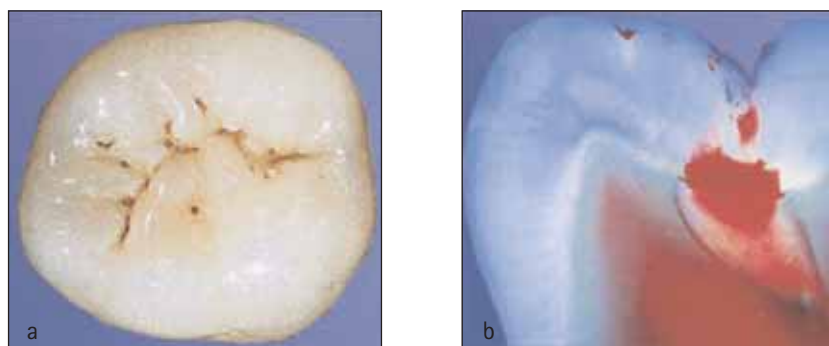

Visione clinica (a) e istologica (b) di una carie nascosta. La sezione istologica evidenzia una carie dentinale, nonostante a occhio nudo la superficie occlusale risulti intatta.

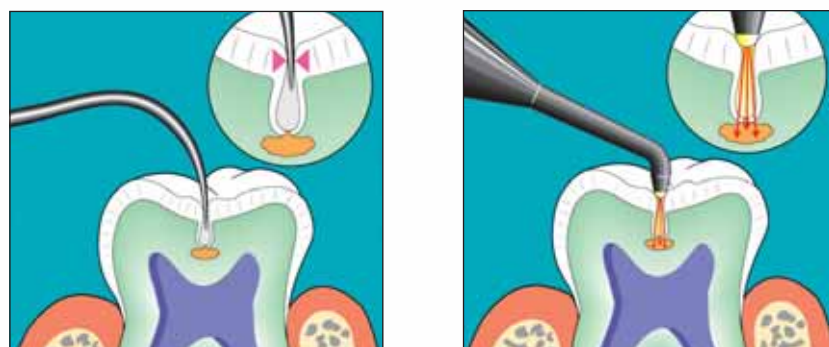

Con strumenti convenzionali, nella maggior parte dei casi, il sondaggio non è possibile e, comunque, non è gradito dal paziente.

La luce laser di KaVo DIAGNOdent penetra nelle fessure fino ad una profondità di 2 mm e riconosce le alterazioni patologiche.



KaVo DIAGNOdent:

La visione moderna della diagnosi: il laser a raggi fluorescenti che reagisce alle più piccole lesioni. In modo delicato e senza contatto.

Così migliora la diagnosi.

Vantaggi per il paziente:

- Riconoscimento precoce della carie
- Referto moderno senza lesione o danno alla sostanza sana del dente
- Trattamento indolore e minimamente invasivo
- Miglior qualità della vita con i propri denti


Vantaggi per dentista:

- La sicurezza matematica di aver riconosciuto la carie
- Pazienti soddisfatti che consiglieranno ad altri il vostro ambulatorio
- Maggiori prestazioni private
- Rapido ritorno dell'investimento

Caso 1:



Nessun segno visivo di carie.

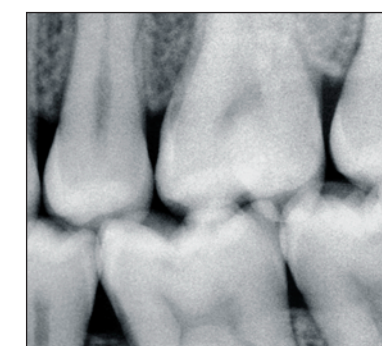

La radiografia non mostra alcuna zona di radiotrasparenza.



DIAGNOdent rileva un valore alto, 28, nel solco mesiale.



Si apre il punto incrinato. La carie ha già raggiunto la dentina.




Restauro altamente conservativo grazie ad una diagnosi di successo e un intervento immediato.

Caso 2:



Esaminato occlusalmente il dente sembra completamente libero dalla carie.

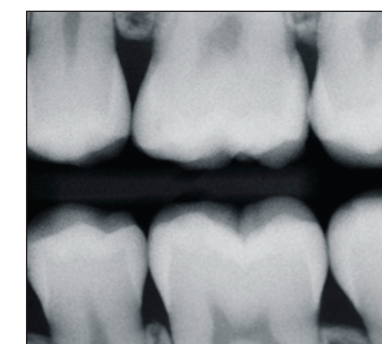

Anche la radiografia non mostra alcun segno di carie.



DIAGNOdent diagnostica una carie evidente sotto la superficie apparentemente intatta



La lesione cariosa viene eliminata. Massima attenzione alla struttura del dente




Il risultato postoperatorio occlusalmente: il dente trattato, senza averne alterato la morfologia e il colore.

Caso 3:



Nessun segno di carie superficiale occlusale all'ispezione.

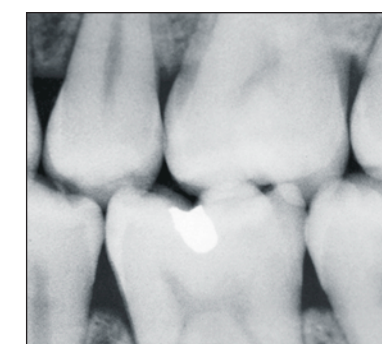

Nella radiografia non è riconoscibile alcuna carie.



DIAGNOdent evidenzia un valore molto elevato nel solco sia centrale che distale.



L'ultima immagine prima del restauro mostra l'entità della zona di preparazione.



Immagine post-operatoria: illustra il risultato dell'intervento.

Consigli terapeutici:

- 0 - 13: normali misure profilattiche
- 14 - 19: profilassi intensiva, ad es. con fluoridi, KaVo HealOzone.
- 20 - 29: restauro minimamente invasivo (HealOzone, Air Abrasion, SONICflex micro) e profilassi intensa
- >30: restauro conservativo e profilassi intensa.

KaVo DIAGNOdent®: 90 per cento.

La percentuale di successo contro la carie!

Con la massima semplicità d'uso.

Massima precisione.

Tutti gli studi scientifici lo hanno confermato: KaVo DIAGNOdent® riconosce con la massima affidabilità la carie nascosta a livello dei solchi anche quando nessuna cavità è ancora visibile. Semplicemente eccezionale. Ispezione visiva, specillazione, raggi x...: nessun procedimento raggiunge risultati paragonabili.

Massima semplicità.

KaVo DIAGNOdent® trova il suo miglior impiego dopo la pulizia professionale del dente. Per ogni dente scannerizzato si ottiene un referto preciso, che viene completato dagli altri fattori di rischio della carie. Sulla base di questa diagnosi l'odontoiatra può programmare un piano terapeutico con l'obiettivo di mantenere sana più struttura dentale possibile.

Modalità di intervento.

Pulizia professionale del dente con bicarbonato (es.: KaVo PROPHYFlex)

La pulizia del dente elimina la possibilità di interferenza con falsi positivi (placca e pigmentazione estrinseca) e fornisce i presupposti ideali per il rilevamento precoce della carie.

Rilevamento del referto con DIAGNOdent


Il sondaggio con DIAGNOdent è talmente facile che lo si può affidare all'assistente specializzata in profilassi, senza problema.

Diagnosi clinica

Sulla base di questo referto, insieme con l'esperienza e la valutazione dei fattori rischio carie, l'odontoiatra può emettere una diagnosi sicura.

Terapia minimamente invasiva

Una diagnosi affidabile consente all'odontoiatra di stabilire la terapia da intraprendere e mantenere i denti dei pazienti sani il più a lungo possibile.

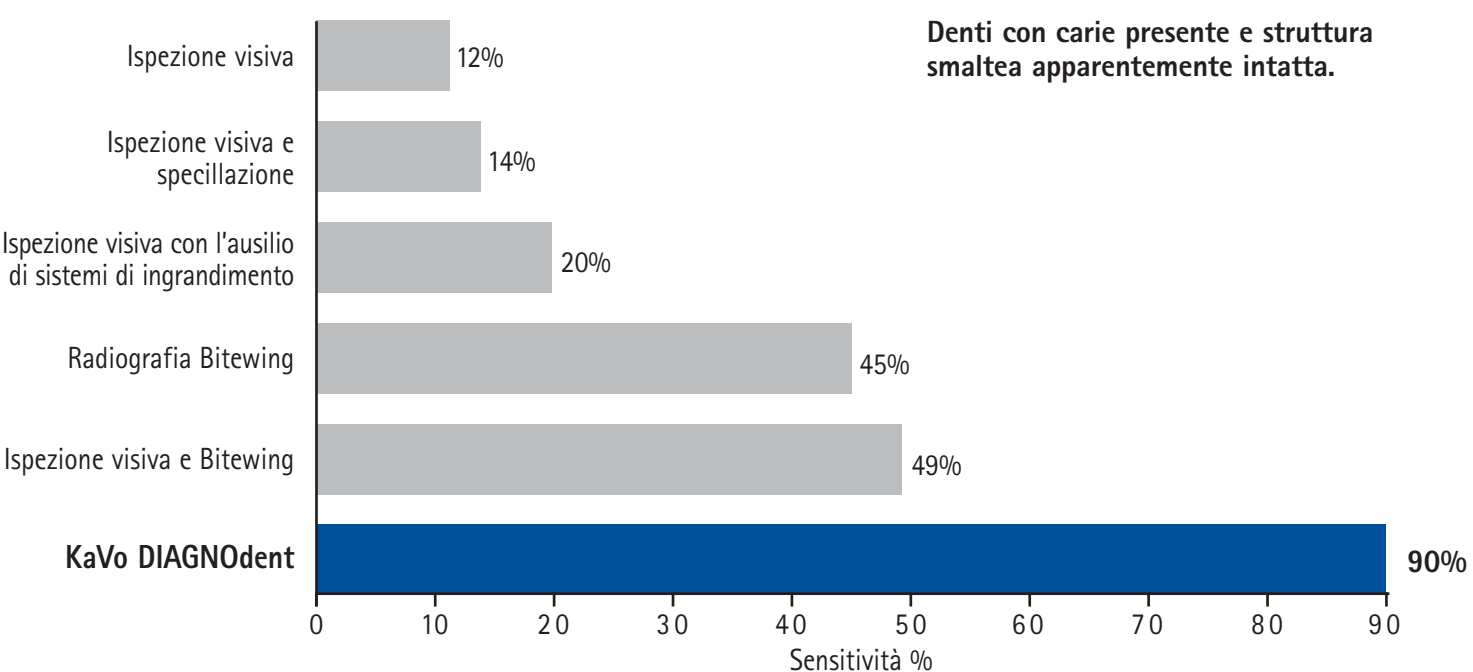


* La sensibilità determina la percentuale di estensione di dente affetto.

KaVo DIAGNOdent®

KaVo DIAGNOdent®

Valutare la struttura interna del dente con delicatezza e trasparenza.

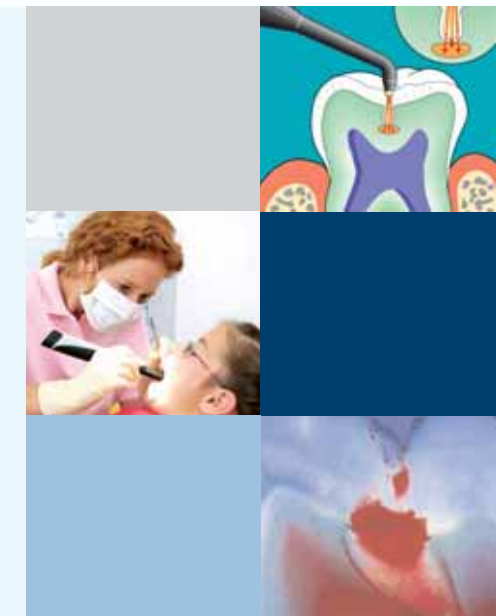

Studio Dentistico
Dott Natale ORLANDO
Via Nazionale, 353
89134 Pellaro
Reggio Calabria

Telefono: 0965 35 91 84



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.